

# HX-400

## Pupillometer

# Benutzerhandbuch



Version: 004

Revisions datum: 2024.11

# Vorwort

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung unseres Pupillometers.



Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Wir hoffen aufrichtig, dass Ihnen dieses Benutzerhandbuch ausreichende Informationen zur Verwendung des Geräts bietet.

Unser Bestreben ist es, den Menschen hochwertige, voll funktionsfähige und personalisiertere Geräte bereitzustellen. Informationen in Werbematerialien und Verpackungskartons können aufgrund von Leistungsverbesserungen ohne weitere Ankündigung geändert werden. Chongqing Yeasn Science - Technology Co., Ltd. behält sich das Recht vor, die Geräte und Materialien zu aktualisieren.

Bei Fragen zur Nutzung wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline: (86-023) 62797666, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihre Zufriedenheit, unser Antrieb!

## Informationen des Herstellers

Bezeichnung: CHONGQING YEASN SCIENCE-TECHNOLOGY CO., LTD

Adresse: 5 DANLONG ROAD, NANAN DISTRICT, CHONGQING, CHINA

Tel:86-23 62797666

## **Vollmacht.**

Leistungsstrasse - shanghai airship company (europa) deutschland. Eib ä-strasse  
80, 20537

# Inhalt

1. Einleitung.....	1
2. Sicherheitshinweis .....	5
3. Beschreibung der Struktur .....	6
4. Vorbeugende Inspektion .....	12
5. Betriebsanleitung .....	12
6. Reinigung und Desinfektion der Anwendungsteile .....	19
7. Wartung .....	19
8. Fehlerbehebung.....	20
9. Umgebungsbedingungen und Lebensdauer .....	21
10. Umweltschutz .....	22
11. Verantwortung des Herstellers .....	23
12. Hinweise zu EMV und anderen Störungen .....	23

# **1. Einleitung**

## **1.1 Verwendungen**

Prinzip: Das Pupillometer nutzt das bildgebende Prinzip einer optischen Linse. Optische Linse prägt das beobachtete Objekt in einer bestimmten Entfernung ein, dann beobachtet der Patient das beobachtete Objekt, und der Optiker kann über das Messfenster die hellen Punkte der Augen des Betrachters feststellen, während der Optiker die linke und rechte Messtaste bewegt, um zu machen die zugehörigen mechanischen Spiralfedern mit den hellen Punkten der Augen des Betrachters zusammenfallen, um den Abstand der Pupillen zu messen.

Verwendungszweck: Zur Messung des Pupillenabstandes des menschlichen Auges.

Medizinischer Zweck: Zur Messung des Pupillenabstandes des menschlichen Auges.

Zielgruppen der Patienten: Erwachsene, Kinder.

Kontakt mit menschlichen Körperteilen: Nase und Stirn.

Vorgesehene Benutzer: Optometristen in der Krankenhausophthalmologie und Optikerfachgeschäfte.

Spezifische Qualifikationen von Gerätebenutzern und/oder anderen Personen: verfügen über ein Qualifikationszertifikat für Optometrie und Brille.

Kontraindikationen: keine.

## **1.2 Eigenschaften**

Dieses Ger ä wurde auf wissenschaftliche und vern ünftige Weise entwickelt und integriert Technologien zu einem mechanischen Spiralfeder-Orientierungsmesssystem, einem optischen System, ESS und Mikrocomputer in einem Ganzen.

\*Verwenden einer mechanischen Spirale, um den reflektierenden Punkt der menschlichen Hornhaut zu nivellieren, um die aufeinanderfolgende Messung zu realisieren. Es zeichnet sich durch Direktheit der Punktabtastung und hohe Orientierungsgenauigkeit aus.

\* Verwendung von linienförmigen Sensoren mit hoher Auflösung, fortschrittlichen intellektualisierten elektronischen Systemen und digitaler Anzeige, die die Testergebnisse sichtbarer, lesbarer und genauer machen.

\*LED-Lampenhaus und ein Design mit geringem Stromverbrauch sorgen für eine längere Lebensdauer der Batterien.

\*PD- und VD-Messung ist verfü gbar.

\*Es bietet eine Kompensation von +2,00 D für den Sehgrad

\*Die Helligkeit des LED-Lampenhauses ist einstellbar.

## **1.3 Wichtigste technische Indizes**

### **1.3.1 Wirksamer Messbereich**

Binokularer Pupillenabstand: 45 mm ~ 82 mm

Linker oder rechter Pupillenabstand: 22,5 mm ~ 41 mm

### **1.3.2 Anzeigefehler: $\leq 0.5\text{mm}$**

1.3.3 Asymmetrischer Fehler:  $\leq 0.5\text{mm}$

1.3.4 Zielentfernung:  $30\text{cm} \sim \infty$

1.3.5 Stromquelle: Spannung: DC 3V

Spezifikation: 5 # AA-Batterie

Menge: 2 Stück ( $2 \times 1,5\text{ V AA-Batterien}$ )

1.3.6 Zeit für automatische Abschaltung:

Ungefähr 1 Minute nach dem Stoppen des Betriebs

1.3.7 Größe:  $221\text{ mm (L)} \times 165\text{ (B)} \times 63\text{ mm (H)}$

1.3.8 Gewicht:  $0.64\text{ kg}$

1.3.9 Es wird erwartet, dass das Produkt kontinuierlich läuft.

1.3.10 Software-Versionsnummer: V3.00

1.3.11 Schutzklasse: IPX0

## 1.4 Symbolbeschreibung

Typenschild und Angaben werden auf das Instrument geklebt, um den Endbenutzern eine entsprechende Information zu geben.

Falls das Typenschild nicht gut aufgeklebt ist oder die Zeichen undeutlich werden, wenden Sie sich bitte an autorisierte Händler.



Hersteller



Herstellungsdatum



Seriennummer



Herstellungsland



CE-Zertifizierung



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)



Anwendungsteil Typ B (Nasenträger und Stirnträger)



Medizinprodukte



Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung



Siehe Bedienungsanleitung/ Broschüre



Autorisierter europäischer Vertreter



Referenznummer



Eindeutige Geräteerkennung



Modell-Nr

**G.W.**

Bruttogewicht

**DIM.**

Dimension



Zeigt an, dass das Paket zerbrechliche Gegenstände enthält und mit Vorsicht behandelt werden sollte



Zeigt an, dass die Versandverpackung vor Regen geschützt ist



Temperaturbereichsidentifikation



Feuchtebereichsidentifikation





## Identifizierung des Atmosphärendruckbereichs

### 1.5 Teileliste


- 1) Pupillometer 1 Satz
- 2) Benutzerhandbuch 1 Einheit

## 2. Sicherheitshinweis



Bitte lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, um Verletzungen, Geräteschäden oder andere mögliche Gefahren zu vermeiden:

- Verwenden Sie das Gerät in Innenräumen und halten Sie es sauber und trocken; Verwenden Sie es nicht in brennbarer, explosiver, hoher Temperatur und staubiger Umgebung;
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser; Achten Sie auch darauf, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät tropft. Stellen Sie das Gerät nicht an feuchten oder staubigen Orten auf und stellen Sie es auch nicht an Orten auf, an denen sich Feuchtigkeit und Temperatur schnell ändern;
- Zerlegen oder berühren Sie die Innenteile des Geräts nicht, da es sonst zu Stromschlägen oder Geräteausfällen kommen kann;
- Das Gerät hat den elektromagnetischen Verträglichkeitstest bestanden. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen zur EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) bei der Montage und Verwendung des Geräts:

- Verwenden Sie das Ger ät nicht mit anderen elektrischen Ger äten, um elektromagnetische St örungen des Ger äts zu vermeiden;
  - Verwenden Sie das Ger ät nicht in der N ähe anderer elektrischer Ger äte, um elektromagnetische St örungen des Ger äts zu vermeiden;
  - Nicht in sauerstoffreicher Umgebung verwendet, Nicht zur Verwendung mit entzündlichen An ästhetika bestimmt, Nicht zur Verwendung mit entzündlichen Stoffen vorgesehen.
  - Achten Sie beim Batteriewechsel auf die Polarit ät, um einen Batteriekurzschluss zu vermeiden.
  - Benachrichtigung: Jedes schwerwiegende Ereignis im Zusammenhang mit dem Produkt beim Benutzer und/oder Patienten ist dem Hersteller und der zust ändigen Beh örde des Mitgliedstaats zu melden, in dem sich der Benutzer und/oder der Patient befindet.
-  Achtung: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformit ät verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ger äts erlöschen lassen können.

### **3. Beschreibung der Struktur**

#### **3.1 Beschreibung der Frontplatte**

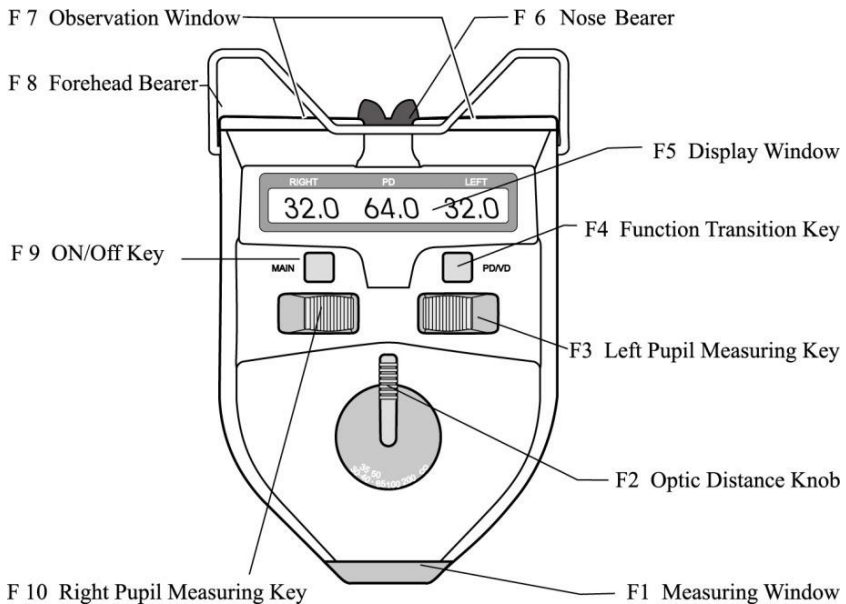


Abb.1

## F1. Messfenster

Das Arbeitsfenster des Prüfpersonals.

## F2. Optischer Entfernungsknopf

Es wird verwendet, um die Umrechnung des gemessenen Wertes der Pupillenentfernung bei verschiedenen optischen Entfernungen von 30 cm ~ durchzuführen.

## F3. Taste zur Messung der linken Pupille

Es wird verwendet, um den linken Pupillenabstand zu messen. Wenn Sie den Schlüssel nach außen schieben, bewegt sich der Pupillenabstandszeiger in die entgegengesetzte Richtung des Nasenträgers. Zu diesem Zeitpunkt steigt der numerische Wert der Pupillendistanz des linken Auges und der binokularen

Pupillendistanz. Durch Verschieben des Schlüssels nach innen bewegt sich der Pupillenabstandszeiger in Richtung des Nasenträgers. Jetzt nimmt der Zahlenwert der Pupillendistanz ab.

#### F4. Funktionsübergangstaste

Der PD- und VD-Messmodus kann durch Drücken der Funktionsübergangstaste umgeschaltet werden. Außerdem kann es verwendet werden, um die LED-Helligkeit, die automatische Ausschaltzeit und die Messgenauigkeit einzustellen.

#### F5. Anzeigefenster (wie in Abb. 2 gezeigt)

Es zeigt den gemessenen numerischen Wert von PD oder VD und einige andere relevante Informationen an.

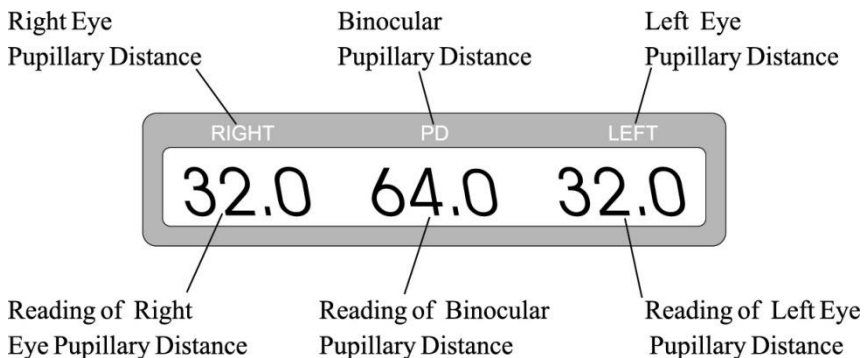


Abb.2

\*Beim Lesen von Informationen im Anzeigefenster wird der richtige Wert

bezeichnet den Abstand zwischen der Mitte des Nasenrückens und dem Pupillenabstand des rechten Auges oder VD des rechten Auges, und der linke Wert bezeichnet den Abstand zwischen der Mitte des Nasenrückens und dem Pupillenabstand VD des linken Auges des

linken Auges. Der PD-Wert steht für den Abstand zwischen der linken Pupille und der rechten Pupille. Die Einheit ist mm.

#### F6. Nasenträger

Der Steg der Testperson ruht auf dem Nasenträger, so dass die Position der Pupillen der Testperson festgelegt ist.

#### F7. Beobachtungsfenster

Zwei Fenster ermöglichen es einer Testperson, das Ziel mit seinen (ihren) Augen anzustarren.

#### F8. Stirnträger

Die Stirn des Probanden ruht auf dem Stirnträger, so dass die Position seiner Pupillen festgelegt ist.

#### F9 EIN/AUS-TASTE

Drücken Sie diese Taste einmal, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um es auszuschalten.

#### F10. Rechte Pupillenmesstaste

Es wird verwendet, um den rechten Pupillenabstand zu messen. Wenn Sie den Schlüssel nach außen schieben, bewegt sich der Pupillenabstandszeiger in die entgegengesetzte Richtung des Nasenträgers. Zu diesem Zeitpunkt nehmen die Pupillendistanz des rechten Auges und die binokulare Pupillendistanz im numerischen Wert zu. Durch Verschieben des Schlüssels nach innen bewegt sich der Pupillenabstandszeiger in Richtung des Nasenträgers. Jetzt nimmt der Zahlenwert der Pupillendistanz ab.

Nasenträger und Stirnträger bilden ein Anwendungsteil vom Typ B.

### 3.2 Beschreibung der Rückseite

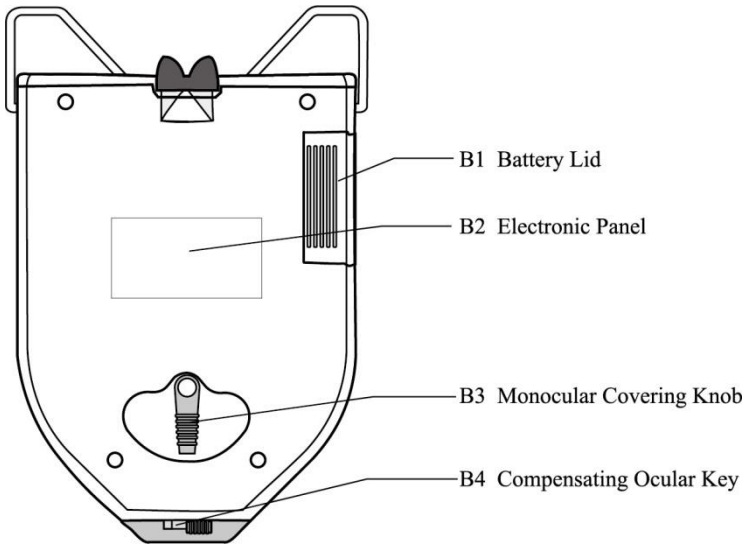


Abb. 3

#### B1. Batteriedeckel

Zum Batteriewechsel den Deckel parallel verschieben.

#### B2. Elektronisches Panel

#### B3. Monokularer Abdeckknopf

Die Abdeckung des rechten oder linken Auges des Probanden erfolgt durch Drehen des Knopfes.

#### B4. Kompensierender Okularschlüssel

Durch Verschieben des Schlüssels kann die Dioptrie der Augen um +2,00 D ausgeglichen werden.

### 3.3 Vom Messfenster aus betrachtet

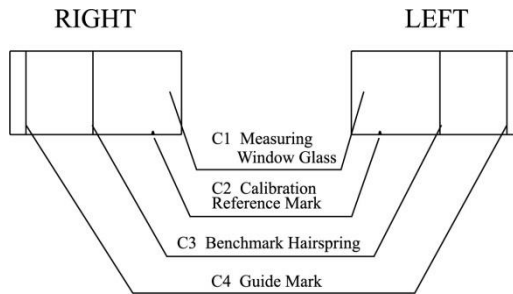


Abb.4

#### C1. Fensterglas messen

Testee sieht durch sie zum grünen Ziel.

#### C2. Kalibrierreferenzmarke

Es wird verwendet, um die Messgenauigkeit zu überprüfen.

#### C3. Benchmark-Spirale

Wenn die Optiker das Gerät verwenden, können sie den Schlüssel verschieben und die Benchmark-Spirale am reflektierenden Lichtpunkt der Pupillen des Probanden ausrichten.

#### C4. Führungsmarke

Die Führungsmarkierung wird verwendet, um während des Prozesses der VD-Messung auf die Oberseite der Hornhaut des Probanden zu zielen.

### 3.4 Vom Beobachtungsfenster aus betrachtet

Anzublickendes Ziel in der Mitte des inneren Gesichtsfeldes des Gerätes, ein augapfelförmiger Kreis ist zu sehen. Es ist ein grünes Zielbild, umgeben von einem hellen Ring. Ein Testteilnehmer sollte beim Messen mit beiden Augen auf das Ziel starren. Um sich an die

Gunst der Augen der Menschen anzupassen, stellt das Ger ä die einstellbare Funktion der LED-Helligkeit ein.

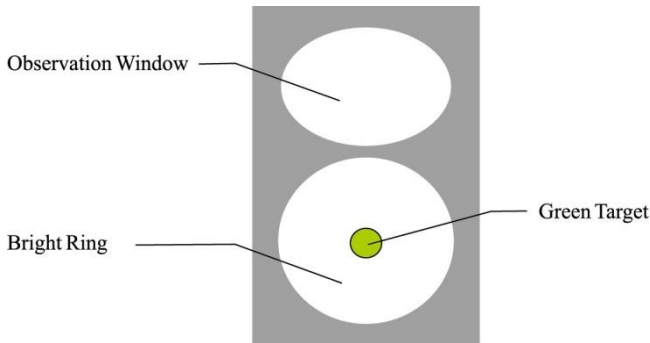


Abb. 5

## 4. Vorbeugende Inspektion

Der Betreiber sollte vor der Verwendung vorbeugende Inspektionen durchführen.

- 1) Das Beobachtungsfenster und das Messfenster sollten sauber sein.
- 2) Die im Anzeigefenster angezeigten Zahlen sollten normal sein.
- 3) Inspektionszyklus: täglich vor dem Gebrauch.

## 5. Betriebsanleitung

Dies ist ein intelligentes High-Tech-Instrument, das sehr einfach zu bedienen ist. Bitte bedienen Sie es nach den folgenden Verfahren, damit Sie schnell und einfach Messdaten erhalten.

### 5.1 Über die Batterie



Bevor Sie das Ger ä t verwenden, legen Sie bitte 2 Stück 5 # AA Alkalibatterien in das Batteriefach ein. Wenn es nicht verwendet wird, nehmen Sie es bitte heraus, um elektrische Energie zu sparen.

\* Es k önnen nur Hochenergie-Alkalibatterien verwendet werden.

Bitte verwenden Sie keine gew öhnlichen S äurebatterien, um das Auslaufen von Batteriefl üssigkeit zu vermeiden, die das Ger ä t besch ädigen k önnte.

\* Achten Sie beim Austauschen auf die Polarit ä t der Batterie.

\*Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie ordnungsgem ä ß, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

## **5.2 Starten und Herunterfahren des Ger ä ts**

### **5.2.1 Ger ä tstart**

Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Start des Ger ä ts zu initialisieren. Der Mikroprozessor im Ger ä t erh ält die Position der Pupillenabstandszeiger und dann die Datenanzeige auf dem entsprechenden LCD-Fenster. Jetzt k önnen Sie die Messung durchf ühren.

### **5.2.2 Ger ä teabschaltung**

Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Ger ä t auszuschalten.

## **5.3 Messung der binokularen Pupillendistanz**

a. Anlaufen. Die initialisierte Einstellung des Ger ä tes ist nur die binokulare Pupillendistanz zur Messung der distance optischen Distanz.

b. Legen Sie den Stirnträger leicht auf die Stirn der Testperson und den Nasenträger leicht auf den Nasenrücken der Testperson und halten Sie das Gerät dann in einem horizontalen Zustand (wie in Abb. 6 gezeigt).

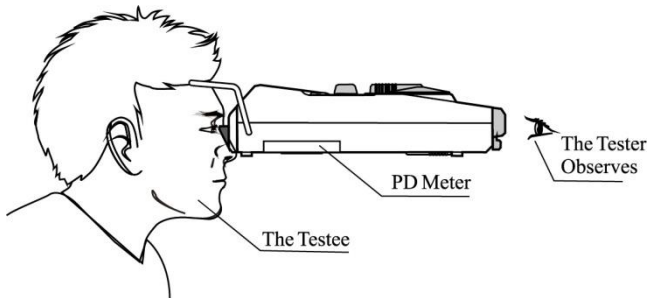


Abb.6

c. Lassen Sie die Testperson auf das grüne Ziel des Geräts starren.

d. Der Tester beobachtet den reflektierenden Lichtfleck auf der Pupille des Probanden durch das Messfenster. Verschieben Sie die linken und rechten Pupillen-Messtasten, der linke und rechte Pupillenabstandszeiger stimmen mit den reflektierenden Lichtpunkten der linken bzw. rechten Pupille des Probanden überein (wie in Abb. 7a und Abb. 7b gezeigt). Die im Anzeigefenster angezeigten Daten sind der gemessene Pupillenabstand.

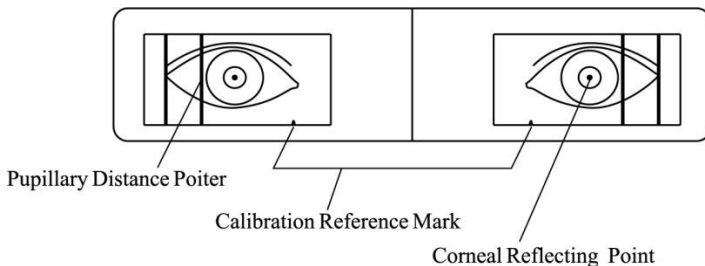


Abb. 7a (Der Anblick, den der Tester durch das Messfenster beobachtet)

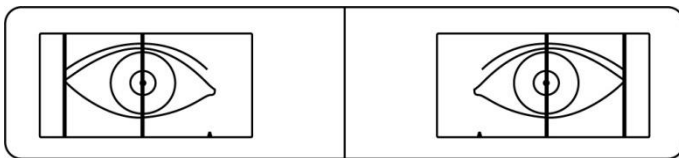


Abb.7b (Der linke und der rechte Zeiger stimmen mit den reflektierenden hellen Punkten überein)

e. Um die Pupillenentfernung bei verschiedenen optischen Entfernungen zu messen, drehen Sie bitte zuerst den optischen Entfernungsknopf (wie in Abb. 1 Nr. 3 gezeigt) auf Ihre optischen Entfernungen und führen Sie dann Ihre Messung durch. Dieses Gerät stellt verschiedene optische Entfernungspositionen wie 30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm, 65 cm, 1 m, 2 m und ein.

\*Um genaue Messdaten zu erhalten und den Messvorgang einfach und schnell durchzuführen, sollte der Tester den Testteilnehmer während des Messvorgangs (und der im folgenden Abschnitt beschriebenen Messung des monokularen Pupillenabstands) daran erinnern, immer auf das grüne Ziel in zu starren einen ebenen Zustand, ohne seine (ihre) Augäpfel zu bewegen.

#### **5.4 Messung des monokularen Pupillenabstands**

a. Wenn Sie den linken oder rechten Pupillenabstand messen müssen, drehen Sie bitte den monokularen Abdeckknopf (wie in Abb. 3 Nr. 2 gezeigt), der das andere Auge vollständig abdecken kann (wie in Abb. 8a und 8b gezeigt).

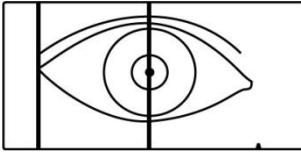


Abb.8a (Messung der rechten Pupillendistanz)

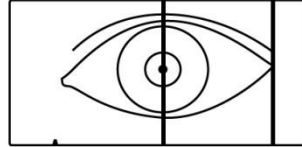


Abb.8b (Messung der linken Pupillendistanz)

b. Der Tester beobachtet den reflektierenden hellen Punkt auf der Pupille des Probanden durch das Messfenster. Verschieben Sie die linken und rechten Pupillen-Messtasten, die linken bzw. rechten Pupillenabstandszeiger stimmen mit den reflektierenden hellen Punkten der linken bzw. rechten Pupille des Probanden überein. Das im Anzeigefenster angezeigte Datum ist nur der gemessene Pupillenabstand.

## 5.5 Messung des VD

- a. Drücken Sie die F4-Funktionsübergangstaste (PD/VD), um in den VD-Messmodus zu gelangen.
- b. Der Optiker führt die Inspektion neben dem Probanden durch, wobei dieser vorzugsweise gegen das Licht gestellt wird. Platzieren Sie das Instrument in der horizontalen Ebene (siehe Abb. 9a) und zielen Sie auf die Führungsmarkierung oben auf der Hornhaut der Testperson.

c. Nachdem das Targeting abgeschlossen ist. Der Optiker schiebt die Puppe nach links/rechts1 Messschlüssel, um die Benchmark-Feder mit der Oberseite der Linse zusammenzubringen (Abb.9b). Der Abstand von der Hornhautoberseite zur montierten Linse kann durch Abzug der Dicke der Linse von dem zu diesem Zeitpunkt digital angezeigten Wert ermittelt werden.

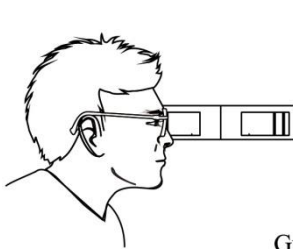


Abb. 9a

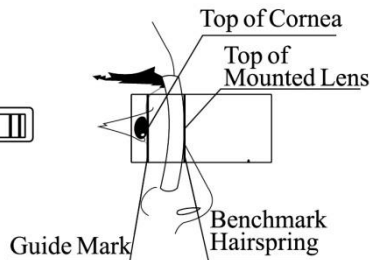


Abb. 9b

## 5.6 LED- und automatische Abschalteinstellungen

- a. Setzen Sie die linke Pupillenmesstaste F3 an das linke Ende und die rechte F10-Taste an das linke Ende und halten Sie sie dort, dann drücken Sie F4 (Funktionsübergangstaste) 5 Mal kontinuierlich, bis der Bildschirm das Bild "-----" anzeigt. Bewegen Sie danach die rechte Messtaste F10 an das rechte Ende und drücken Sie die Funktionsübergangstaste erneut, dann gelangen wir in den Einstellungsmodus LED-Helligkeit und automatische Abschaltung.
- b. In diesem Modus dient das Bewegen der linken Messtaste von F3 zur Einstellung der automatischen Abschaltzeit, die auf dem Bildschirm angezeigt wird (Zeitbereich: 0,5-3 Minuten mit einem 0,5-Minuten-Intervall).

c. Durch Bewegen der rechten Messtaste von F10 wird die LED-Helligkeit eingestellt und der entsprechende LED-Stromwert (je größer der LED-Stromwert, desto heller leuchtet die LED-Lampe) wird auf dem Bildschirm angezeigt. (Stromwertbereich: 0,5-5 mA mit dem Intervall von 0,5 mA).

d. Sind die beiden oben genannten gut eingestellt, können die eingestellten Werte durch erneutes Drücken der Funktionsübergangstaste gespeichert werden und das Gerät befindet sich wieder im Messmodus.

### **5.7 Einstellung der Messgenauigkeit**

a. Schieben Sie im PD- oder VD-Messmodus die linke Pupillenmesstaste F3 zum linken Ende und die rechte Pupillenmesstaste F10 zum linken Ende und drücken Sie dann die Funktionsübergangstaste F4 fünfmal kontinuierlich, bis der Bildschirm das Bild „-----“ F3 linke Pupillenmesstaste zum rechten Ende schieben, F4 Funktionsübergangstaste drücken, um die Genauigkeit einzustellen.

b. In diesem Modus kann durch Verschieben der linken Pupillenmesstaste die Anzeigegenauigkeit auf 0,1, 0,2 oder 0,5 für PD von 45 bis 82 mm und für andere auf 0,5 mm eingestellt werden. Wenn die Genauigkeit eingestellt ist, drücken Sie zum Speichern erneut die Funktionsübergangstaste, dann kehrt das Gerät in den Messmodus zurück.

### **5.8 Verwendung der Kalibrierreferenzmarke**

Bevor Sie das PD-Meter verwenden, empfehlen wir Ihnen zu überprüfen, ob der Anzeigewert normal ist und „die Innenprüfung von PD 46mm“ durchzuführen.

Verschieben Sie die C3-Benchmark-Spirale und bringen Sie sie in Übereinstimmung mit der C2-Kalibrierungs-Referenzmarke. Wenn die PD 46 mm und die linke bzw. rechte PD 23 mm beträgt, ist dies normal.

## **6. Reinigung und Desinfektion der Anwendungsteile**

- 1) Verwenden Sie bei der Reinigung des Produkts keine ätzenden Chemikalien.
- 2) Nasenträger und Stirnträger sind die Teile, die in häufigem Kontakt mit der Testperson sind und umgehend gereinigt und desinfiziert werden sollten. Schmutz sollte mit einem weichen Tuch gereinigt werden, das in lösliches Reinigungsmittel oder Wasser getaucht wurde, und dann das Produkt zur Desinfektion mit medizinischem Alkohol abwischen. Es wird empfohlen, dies vor jedem Test zu tun.

## **7. Wartung**

- 1) Es wurde vor der Auslieferung genau eingestellt. Bitte zerlegen Sie es nicht, um es genau zu halten.
- 2) Es muss in einem gut klimatisierten, trockenen Raum gelagert und verwendet werden.
- 3) Als High-Tech-Produkt soll das Gerät vor Vibrationen oder Stößen geschützt werden.

4) Halten Sie es sauber und berühren Sie nicht die Oberfläche des Fensterglases.

5) Jegliche ätzende Chemikalie ist für die Reinigung verboten.

6) Fingerabdrücke, Staub oder Flecken sollten mit saugfähiger Watte gereinigt werden, die mit einer gemischten Lösung aus Alkohol und Äther getaucht ist.

7) Demontieren Sie es im Falle einer Fehlfunktion nicht selbst. Bitte wenden Sie sich an den lokalen Vertriebspartner oder den Hersteller, um Hilfe zu erhalten.

8) Sofern nach dem Start keine Anzeige im Displayfenster erscheint, überprüfen Sie bitte die Polarität der Batterie, um zu sehen, ob sie richtig platziert und elektrifiziert ist.

Achtung: Während des Gebrauchs des Produkts können keine Service- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Achtung: Änderungen an diesem Gerät sind nicht erlaubt.

Warnung: Entfernen Sie den Akku, wenn das Produkt voraussichtlich längere Zeit nicht verwendet wird.

Erklärung: Der Hersteller stellt Schaltpläne, Teilelisten, Beschreibungen und Kalibrieranweisungen zur Verfügung, um das Servicepersonal bei der Reparatur von Teilen zu unterstützen.

## **8. Fehlerbehebung**

Bei Geräteproblemen überprüfen Sie bitte das Gerät gemäß der folgenden Tabelle, um eine Anleitung zu erhalten. Wenn die Störung




nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an die Wartungsabteilung von Chongqing Yeasn Science - Technology Co., Ltd. oder den autorisierten Händler.

Ärger	Gründe dafür	Lösungen
Keine Daten im Anzeigefenster angezeigt	Falsche Installation der Batterie	Setzen Sie die Batterie richtig ein
	Unzureichende Batteriekapazität	Ersetzen Sie die Batterie

## 9. Umgebungsbedingungen und Lebensdauer


### 9.1 Umgebungsbedingungen für den Normalbetrieb

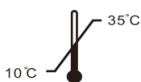

Umgebungstemperatur: 10 °C ~35 °C




Relative Luftfeuchtigkeit: 30 % ~ 85 % (keine Kondensation)

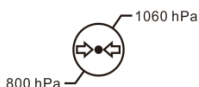

Atmosphärischer Druck: 800hPa~1060hPa

Innenbedingungen: sauber und ohne direktes Licht.


### 9.2 Umgebungsbedingungen für Transport und Lagerung

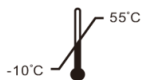

Umgebungstemperatur: -10 °C ~55 °C



Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 85 % (keine Kondensation)

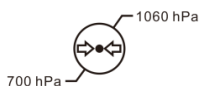

Atmosphärischer Druck: 700hPa~1060hPa

Innenbedingungen: gute Belüftung und ohne korrosive Gase.

### **9.3 Lebensdauer**

Die Lebensdauer des Gerätes beträgt 8 Jahre ab Erstinbetriebnahme bei sachgemäßer Wartung und Pflege.

## **10. Umweltschutz**



### **INFORMATIONEN FÜR BENUTZER**

Bitte recyceln oder entsorgen Sie die gebrauchten Batterien und anderen Abfälle, um die Umwelt zu schützen.

Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU im Verhältnis eins zu eins an den örtlichen Sammelstellen abgegeben oder beim Kauf eines neuen Produkts an den Händler zurückgegeben werden muss, um es zu minimieren oder zu demontieren seine Auswirkungen auf die Umwelt.

Sehr kleine WEEE (keine Außenabmessungen über 25 cm) können an Endverbraucher kostenlos und ohne Verpflichtung zum Kauf von EEE eines gleichwertigen Typs an den Handel geliefert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen oder regionalen Behörden. Elektronische Produkte, die nicht in den selektiven Sortierprozess aufgenommen werden, sind aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe potenziell gefährlich für die

Umwelt und die menschliche Gesundheit. Die unrechtmäßige Entsorgung des Produkts ist gemäß der geltenden Gesetzgebung mit einer Geldbuße verbunden.

## **11. Verantwortung des Herstellers**

Das Unternehmen ist für die Auswirkungen auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung unter folgenden Umständen verantwortlich:

-Montage, Ergänzungen, Modifikationen, Änderungen und Reparaturen werden von autorisiertem Personal des Unternehmens durchgeführt;

-Elektrische Einrichtungen im Raum entsprechen den einschlägigen Anforderungen und

-Das Gerät wird gemäß der Bedienungsanleitung verwendet.

## **12. Hinweise zu EMV und anderen Störungen**

1\* WARNUNG: Die Verwendung dieses Geräts neben oder gestapelt mit anderen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu Fehlfunktionen führen könnte. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.“

2\* WARNUNG: Die Verwendung von Zubehör, Wandlern und Kabeln, die nicht vom Hersteller dieses Geräts angegeben oder bereitgestellt wurden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder verringerter elektromagnetischer Störfestigkeit

dieses Ger äts und zu einem unsachgem äßen Betrieb f ühren.“


3\* WARNUNG: Tragbare HF-Kommunikationsger äte (einschlie ßlich Peripherieger äte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht n äher als 30 cm (12 Zoll) von Teilen des ME-Ger äts entfernt verwendet werden, einschlie ßlich der vom Hersteller angegebenen Kabel. Andernfalls k önn te die Leistung dieses Ger äts beeintr ächtigt werden.“

Leitlinien und Herstellererkl ärung – Elektromagnetische Emission		
Der HX-400 ist f ür den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des HX-400 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.		
Abgasuntersuchung	Beachtung	Elektromagnetische Umgebung – Anleitung
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Der HX-400 verwendet HF-Energie nur f ür seine internen Funktionen. Daher sind seine HF-Emissionen sehr gering und verursachen wahrscheinlich keine Interferenzen in nahegelegenen elektronischen Ger äten.
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse b	Das Pupilmeter HX-400 ist f ür den Einsatz in allen Einrichtungen geeignet, einschlie ßlich Wohngeb äuden und solchen, die direkt an das ö ffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Wohngeb äude versorgt.
Harmonische Emissionen IEC 61000-3-2	Unzutreffend	
Spannungsschwankungen/ Flickeremissionen IEC 61000-3-3	Unzutreffend	

<b>Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit</b>			
Der HX-400 ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des HX-400 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.			
IMMUNITÄTStest	IEC 60601 Teststufe	Konformitätsstufe	Elektromagnetische Umgebung – Anleitung
Elektrostatisch Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft	±8 kV Kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Bei synthetischen Bodenbelägen sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrische schnelle Transienten/Burst IEC 61000-4-4	±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Ein-/Ausgangsleitungen	Unzutreffend	Die Qualität der Netzstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Überspannung IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV Leitung(en) zu Leitungen ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV Leitung(en) gegen Erde	Unzutreffend	Die Qualität der Netzstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und Spannungsschwankungen auf den Eingangsleitungen der Stromversorgung IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 Zyklen Bei 0 °; 45 °; 90 °; 135 °; 180 °; 225 °; 270 ° und 315 °  0 % UT; 1 Zyklus und 70 % UT; 25/30 Zyklen Einphasig; bei 0 °  0 % UT; 250/300 Zyklen	Unzutreffend	Die Qualität der Netzstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Benutzer des HX-400 bei Unterbrechungen der Stromversorgung einen kontinuierlichen Betrieb benötigt, wird empfohlen, den

			HX-400 über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder einen Akku mit Strom zu versorgen.
Stromfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	30A/m	30 A/m	Magnetfelder mit Netzfrequenz sollten die für einen typischen Standort in einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung charakteristischen Werte aufweisen.
HINWEIS: UT ist der Wechselstrom. Netzspannung vor dem Anlegen des Prüfpegels.			

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit			
Der HX-400 ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des HX-400 sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.			
IMMUNITÄT Stest	IEC 60601 Prüfstand	Konformitätsstufe	Elektromagnetische Umgebung – Anleitung
Leitungsgeführte HF IEC 61000-4-6	3V 0,15 MHz bis 80 MHz 6 V in ISM-Bändern zwischen 0,15 MHz und 80 MHz	Unzureichend	Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher an Teilen des HX-400, einschließlich Kabeln, als dem empfohlenen Schutzabstand verwendet werden, der aus der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung berechnet wird. Empfohlener Trennungsabstand $d = 1,2\sqrt{P}$
Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	10 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz to 2,7 GHz Dabei ist P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) laut Senderhersteller und d der empfohlene Schutzabstand in Metern (m). Die Feldstärken von festen HF-Sendern, die durch eine elektromagnetische

			Standortuntersuchungabestimmt wurden, asollten in jedem Frequenzbereich unter dem Konformit äspegel liegen.b In der N ähe von Ger äten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können St örungen auftreten: 
ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der h öhere Frequenzbereich. HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Gegenst änden und Personen beeinflusst.			
a Feldst ärken von ortsfesten Sendern wie Basisstationen für Funktelefone (Mobiltelefone/schnurlose) und mobile Landfunkger äte, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk und TV-Rundfunk können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung aufgrund fester HF-Sender zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldst ärke an dem Ort, an dem der HX-400 verwendet wird, den oben angegebenen anwendbaren HF-Konformit äspegel überschreitet, sollte der HX-400 beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine anormale Leistung beobachtet wird, können zus ätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. b Über den Frequenzbereich 0,15 Hz bis 80 MHz sollten die Feldst ärken kleiner als 3 V/m sein.			

Leitlinien und Herstellererkl ärung – IMMUNIT ÄT gegen N äherungsfelder von drahtlosen HF-Kommunikationsger äten					
Immunit äst est	IEC60601 Prüfstand				Konformit ässtufe
	Testh äufigkeit	Modulation	Maximal Leistung	Immunit äsg rad	
Abgestrahlte HF IEC61000-4-3	385 MHz	**Impulsmodulation: 18Hz	1.8W	27V/m	27 V/m
	450 MHz	*FM+ 5Hz Abweichung: 1kHz Sinus	2 W	28V/m	28 V/m
	710 MHz 745 MHz 780 MHz	**Impulsmodulation: 217Hz	0.2 W	9V/m	9 V/m

	810 MHz 870 MHz 930 MHz	**Impulsmodulation: 18Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	1720 MHz 1845 MHz 1970 MHz	**Impulsmodulation: 217Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	2450 MHz	**Impulsmodulation: 217Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	5240 MHz 5500 MHz 5785 MHz	**Impulsmodulation: 217Hz	0.2 W	9 V/m	9 V/m

Hinweis\* - Als Alternative zur FM-Modulation kann eine 50 %-Pulsmodulation bei 18 Hz verwendet werden, da dies zwar keine tatsächliche Modulation darstellt, aber der schlimmste Fall wäre.

Hinweis\*\* - Der Träger soll mit einem Rechtecksignal mit 50 % Tastverhältnis moduliert werden.